




دستورالعمل استفاده از فرز سرامیکی Tika-BurTM CTT

این دستورالعمل باید قبل از استفاده از محصول به دقت مطالعه شود.

دستورالعمل استفاده از فرز سرامیکی

Tika-Bur™CTT

تصویر شماتیک قطعات اصلی محصول

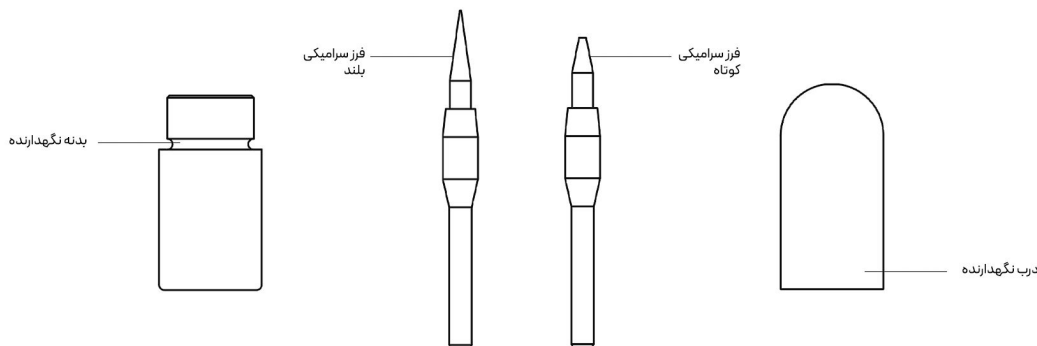

[fa]

نکات استفاده

- فرز سرامیکی را درون توربین قرار دهید و اطمینان حاصل کنید به درستی در آن قرار گرفته باشد.
- سرعت مناسب چرخش توربین جهت استفاده از فرز سرامیکی در محدوده ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ هزار دور در دقیقه می باشد.
- در هنگام استفاده از فرز سرامیکی باید خروجی آب توربین قطع شده باشد و فرز سرامیکی به صورت خشک استفاده شود، در غیر این صورت گرمای کافی جهت برداشت بافت و انعقاد عروق خونی ایجاد نمی گردد.
- هنگام جراحی از برخورد فرز سرامیکی با استخوان، دندان، ترمیم های دندانی و اجزای ایمپلنت های فلزی پرهیز نمایید، زیرا این تماس موجب تغییر رنگ و شکستن سر فرز سرامیکی می شود.
- در موارد افزایش عمق شیار لثه به حفظ ساختار اپیتلیوم مارجینال و میزان لثه کراتینه شده توجه شود.
- فرز سرامیکی تا زمانی که به سر سرامیکی آن آسیب وارد نشده باشد قابلیت استفاده متعدد را دارد.

روش استفاده

- پیش از استفاده از فرز سرامیکی اطمینان حاصل نمایید که محل جراحی خشک و عاری از خون و سایر مایعات باشد.
- برای حصول نتیجه بهتر، فرز سرامیکی باید به صورت آرام و قلم مویی با زاویه ۴۵-۳۰ درجه بر روی بافت نرم حرکت داده شود و از حرکات سریع و عمیق پرهیز شود.

خدمات پس از فروش:

این محصول دارای یک سال ضمانت گارانتی می باشد. این ضمانت شامل خرابی محصول ناشی از ضربه، شست و شو با مواد شیمیایی و استفاده و نگهداری خارج از دستورالعمل ارائه شده نمی باشد.

توضیحات محصول

فرز سرامیکی Tika-Bur™CTT، یک ابزار چرخنده تخصصی برای برش بافت نرم در دندانپزشکی است. این ابزار با اتصال به هندپیس سرعت بالا (توربین) می تواند جهت برش بافت لثه مورد استفاده قرار گیرد. این دستورالعمل جهت استفاده صحیح از فرز سرامیکی تهیه شده است.

کاربردها

از جمله کاربردهای فرز سرامیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ژئینژیوکتومی
- آپروکولوکتومی
- جراحی افزایش طول تاج
- آشکارسازی ایمپلنت های داخل استخوانی در جراحی های دو مرحله ای
- برداشتن بافت گرانولاسیون
- اکسپوز دندان های شکسته و نهفته
- شکل دهی بافت نرم لثه
- اکسپوز پوسیدگی عمیق ناحیه سرویکال

استریلیزاسیون

- فرزهای سرامیکی به صورت غیر استریل بسته بندی می شوند لذا قبل از هر بار مصرف باید استریل شوند.
- فرز سرامیکی در دستگاه های استاندارد اتوکلاو و طبق پروتکل های استاندارد استریلیزاسیون، در دمای ۱۳۴ درجه سانتی گراد به مدت ۳ دقیقه استریل می گردد.
- توصیه می شود فرز سرامیکی داخل کپسول فلزی، در اتوکلاو استریل گردد.

تولید مستقل توسط شرکت پویان طب تیکا

آدرس: اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان اندیشه ۱، واحد ۱۴۰۴


ایمیل شرکت: Info@tikadentplus.ir



Instruction to use Tika-BurTM CTT

Read the instructions carefully before using.

Schematic image to illustrate the main parts

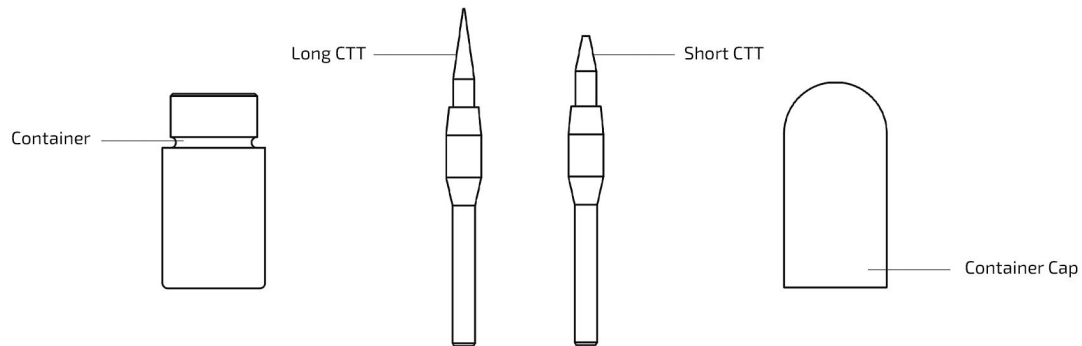

[en]

Product Description:

Tika-Bur™ CTT Ceramic Bur is a specialized rotary instrument designed for soft tissue cutting in dentistry. This tool can be attached to a high-speed handpiece (turbine) and used for gingival tissue cutting. This instruction manual has been prepared to ensure the proper use of the ceramic bur.

Applications:

Some of the applications of the ceramic bur include:

- Gingivectomy
- Operculectomy
- Esthetic crown lengthening
- Uncovering intraosseous implants excising granulation tissue
- Exposing fractured teeth and unerupted teeth
- Contouring of inflamed gingival soft tissue.
- Exposing deep cervical caries or external resorption.

Sterilization:

- Tika-Bur™ CTT is delivered in non-sterile packaging. Therefore, must be sterilized before use each time.
- Tika-Bur™ CTT must be autoclaved in standard autoclave Equipment at 134°C for 3 minutes.
- It is recommended to sterilize the bur inside the metal box in the autoclave.

Usage tips:

- Place the Tika-Bur™ CTT in air turbine handpiece, and make sure it's properly placed and fixed.
- Tika-Bur™ CTT operates at a speed of 300,000 to 500,000 rpm.
- Make sure water supply of the air turbine handpiece is turned off, and air turbine handpiece is used with non-water coolant. Otherwise the necessary/proper heat to remove tissue and coagulation of blood vessels is not generated, which results in bleeding.
- Avoid contact of Tika-Bur™ CTT with bone, teeth, dental restorations and metallic components of implants during surgery, as this can cause color change or break the ceramic head of the bur.
- In case of increasing gingival groove depth, pay attention to preserve the structure of marginal epithelium and the level of keratinized gingiva.
- Tika-Bur™ CTT can be used several times as long as its ceramic head is undamaged.

Usage instruction:

- Before using the Tika-Bur™ CTT, ensure that the area is dry and free of any liquid and blood.
- For optimal results, Tika-Bur™ CTT should be moved gently and delicately within soft tissue at the angle of 45-30 degrees. Avoid rapid and deep movements.

After-Sales Service

The product is covered by a 1-year warranty. This warranty does not cover damages to the device caused by impact, washing with chemicals, use and maintenance of the device outside the provided instructions.

Manufactured by Pooyan Teb Tika Co. Ltd.

WWW.TIKADENTPLUS.IR

Info@tikadentplus.ir



No. 404, Andisheh 1 Building,
Isfahan Science & Technology Town, Isfahan, Iran