





دستورالعمل استفاده از دستگاه کامپوزیت وارمر Tika-ResTM Warmer-NL

این دستورالعمل باید قبل از استفاده از محصول به دقت مطالعه شود.

دستورالعمل استفاده از کامپوزیت وارمر

Tika-Res™ Warmer-NL

تصویر شماتیک قطعات اصلی دستگاه

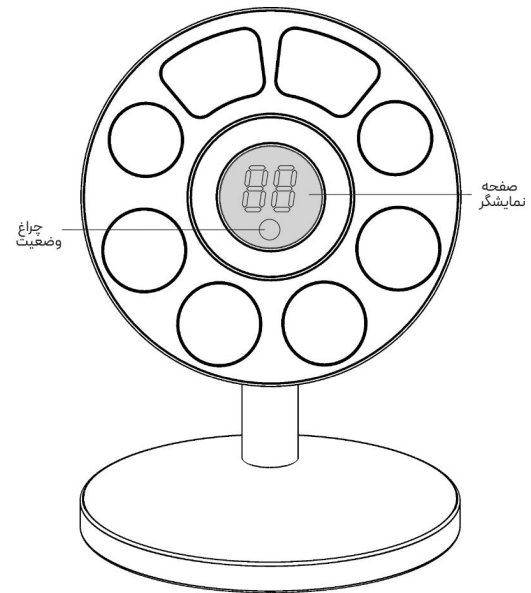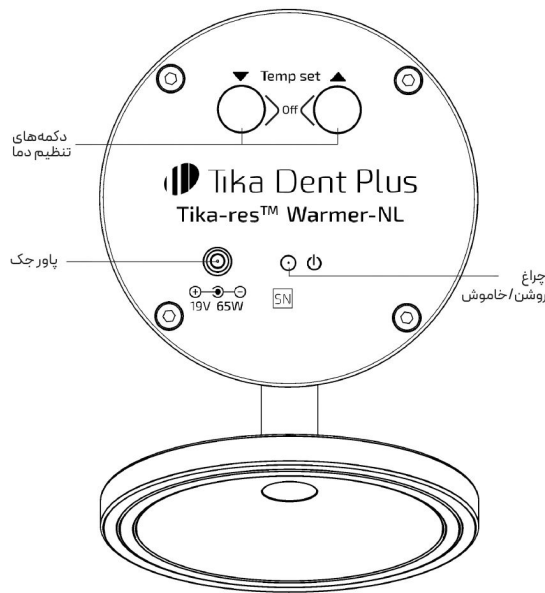

[fa]

نصب و راه اندازی

- جهت روشن کردن کامپوزیت وارمر تیکا دنت پلاس، فیش آداپتور را به پشت دستگاه متصل کنید. صفحه نمایشگر و چراغ LED قرمز پشت دستگاه با اتصال به منبع برق روشن می‌گردد.
- جهت تنظیم دمای دلخواه از دکمه‌های افزایش و کاهش دما استفاده نمایید.
- چراغ وضعیت به رنگ آبی نشانگر افزایش تدریجی دمای دستگاه می‌باشد.
- بسته به دمای تنظیم شده، مدت زمان مورد نیاز جهت رسیدن به دمای دلخواه در حدود ۵ الی ۱۰ دقیقه می‌باشد.
- چراغ وضعیت به رنگ سبز نشانگر رسیدن دمای دستگاه به عدد تنظیم شده است.
- در صورتی که دمای دستگاه بالاتر از دمای تنظیم شده توسط کاربر باشد، چراغ وضعیت قرمز شده و دستگاه تدریجاً خنک می‌شود.
- جهت خاموش کردن دستگاه دو دکمه تنظیم دما را همزمان به مدت یک ثانیه نگه دارید.
- در صورتی که دستگاه بیش از ۴ ساعت بدون تغییر در تنظیمات روشن بماند، به طور خودکار خاموش خواهد شد.
- در صورتی که دستگاه بیش از یک ساعت بدون استفاده باقی می‌ماند، توصیه می‌شود آن را به طور دستی خاموش کنید.

توضیحات محصول

دستگاه کامپوزیت وارمر Tika-Res™ Warmer-NL یک دستگاه حرفه‌ای برای گرم کردن مواد دندان‌مانند انواع کامپوزیت، بی‌حسی موضعی و سدیم هیپوکلریت است. این دستگاه با قابلیت تنظیم دمای دقیق بین ۳۵ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد، به کاربران اجازه می‌دهد مواد مورد نیاز خود را در ابعاد مختلف و در دمای دلخواه گرم کنند. طراحی کاربرپسند، نمایشگر دیجیتال دما، و چراغ نمایشگر وضعیت دما، از ویژگی‌های برجسته این محصول است.

کاربردها

از کامپوزیت وارمر تیکا دنت پلاس می‌توان به طور خاص جهت گرم کردن مواد زیر استفاده نمود:

- کامپوزیت‌های دندان‌مانند
- بی‌حسی موضعی
- سدیم هیپوکلریت

موارد احتیاط

- در دماهای بالا، سطوح فلزی دستگاه ممکن است داغ شوند؛ لطفاً هنگام کار با دستگاه احتیاط کنید.

پارامترها

- دقت کنترل دما: ۰.۱ درجه
- دقت نمایشگر: ۱ درجه
- محدوده دمایی: ۳۵ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد

روش تمیز کردن و ضد عفونی

- جهت تمیز کردن کامپوزیت وارمر تیکا دنت پلاس می‌توانید از یک دستمال مرطوب الکلی استفاده کنید.
- از غوطه ور شدن یا نفوذ آب به هر کدام از قطعات دستگاه اکیداً جلوگیری نمایید.
- از اتوکلاو کردن دستگاه خودداری نمایید.

خدمات پس از فروش

این دستگاه دارای یک سال گارانتی می‌باشد. این ضمانت شامل
آداپتور و خرابی دستگاه ناشی از ضربه، نوسانات برق، نفوذ مایعات،
آتش سوزی، تعمیر و سرویس توسط اشخاص غیر مجاز، استفاده و
نگهداری از دستگاه خارج از دستورالعمل ارائه شده و بروز هرگونه
حوادث غیر مترقبه نمی‌باشد.

این دستگاه دارای یک سال گارانتی می‌باشد. این ضمانت شامل
آداپتور و خرابی دستگاه ناشی از ضربه، نوسانات برق، نفوذ مایعات،
آتش سوزی، تعمیر و سرویس توسط اشخاص غیر مجاز، استفاده و
نگهداری از دستگاه خارج از دستورالعمل ارائه شده و بروز هرگونه
حوادث غیر مترقبه نمی‌باشد.

اطلاعات فنی

- ولتاژ: ۱۹ VDC
- توان: ۶۵ W
- محدوده دمایی دستگاه:
محدوده دمای عملکرد: ۰-۴۰ درجه سلسیوس
محل نگهداری: منفی ۲۰ تا ۶۰ درجه سلسیوس
رطوبت: ۱۰ تا ۹۵ درصد

تولید مستقل توسط شرکت پویان طب تیکا

آدرس: اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان
اندیشه ۱، واحد ۱۴۰۴

ایمیل شرکت: Info@tikadentplus.ir




تیکا دنت پلاس
Tika Dent Plus

Instruction to use Tika-Prep™ Warmer-NL

Read the instructions carefully before using.

Schematic image to illustrate the main parts

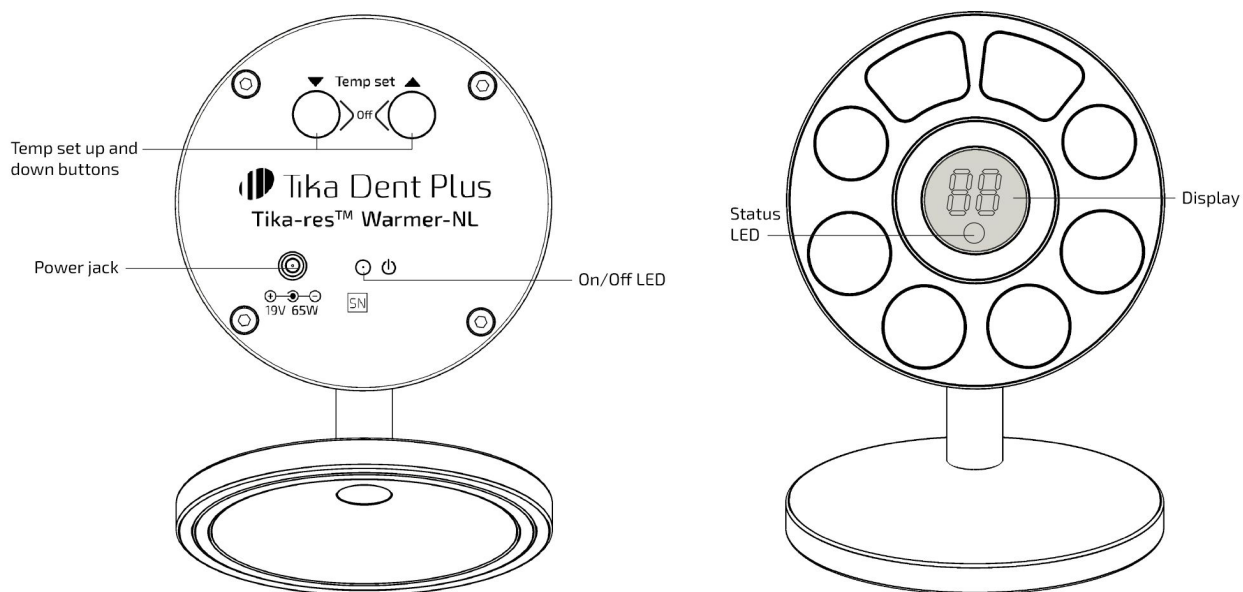

[en]

Product Description:

Tika-Res™ Warmer-NL is a professional device designed for heating dental materials such as various types of composite, local anesthetics, and sodium hypochlorite. With precise temperature adjustment ranging from 35°C to 70°C, this device allows users to heat their materials in different sizes at their desired temperature.

Key features of this product include a user-friendly design, a digital temperature display, and a temperature status indicator light.

Applications:

Tika-Res™ Warmer-NL is specifically designed to provide heat to various materials such as:

- Dental Composites
- Local Anaesthetic (LA)
- Sodium Hypochlorite

Precaution:

- Exercise caution as the unit may become hot to the touch when in operation at high temperatures, particularly the metallic surfaces.

Setup

- To turn on the Tika-Res™ Warmer-NL, connect the adapter plug to the power jack. Once connected to a power source, the display screen and the red LED light at the back of the device will turn on.
- Use the temperature set up and down buttons to adjust the desired temperature.
- The blue status LED light indicates that the device is gradually heating up.
- Depending on the set temperature, the time required to reach the desired temperature is approximately 5 to 10 minutes.
- The green status LED light indicates that the device has reached the set temperature.
- If the device temperature exceeds the user-set temperature, the red status LED light will turn on, and the device will gradually cool down.
- To turn off the device, press and hold both temperature adjustment buttons simultaneously for one second.
- If the device remains on for more than 4 hours without any changes in settings, it will automatically turn off.
- It is recommended to manually turn off the device if it is not in use for more than one hour.

Parameters:

- Accuracy of temperature controlling: 0.1 degrees
- Display accuracy: 1 degree
- Temperature range: 35-70 degrees Celsius

Cleaning/Disinfection Instruction:

- It is possible to clean Tika Warmer by wiping them with a wet alcohol wipe.
- Avoid submerging any parts in liquid.
- Avoid autoclaving any parts of the unit.

After-Sales Service:

The device is covered by a 1-year warranty on materials and construction. This warranty does not cover the adapter and damages to the device caused by impact, power fluctuations, liquid intrusion, fire, repairs and servicing by unauthorized persons, use and maintenance of the device outside the provided instructions, and any unforeseen incidents.

Technical Data:

- Voltage: 19 VDC
- Power: 65 W
- Temperature range:
Operating: 0°C – 40°C
Storage: -20°C – 60°C
Humidity: 10 – 95%

Manufactured by Pooyan Teb Tika Co. Ltd.

WWW.TIKADENTPLUS.IR

Info@tikadentplus.ir



No. 404, Andisheh 1 Building,
Isfahan Science & Technology Town, Isfahan, Iran